

## ガリレアンルーペマルチ

### ガリレアンルーペマルチセットII

価格 39,800円

### ガリレアンルーペマルチ

価格 25,000円

『ガリレアンルーペマルチ』と『デンタルLEDヘッドライトII』のセットです。



一般名称: 双眼ルーペ  
医療機器分類: 一般医療機器  
届出番号: 13B2X10104100316

#### 構成

- ガリレアンルーペマルチ用フレーム本体(シルバー/Red)
- フレームバンド
- ラバーバンド
- レンズキャップ2個
- フリップハンドル1個
- 清掃布1枚
- ドライバー1本
- ルーペ袋
- 専用ケース



一般名称: 双眼ルーペ  
医療機器分類: 一般医療機器  
届出番号: 13B2X10104100286

### デンタルLEDヘッドライトII マルチタイプ

価格 23,800円

軽量でコンパクトなバッテリーバックを採用し、ポケットにすっぽりと入ります。



一般名称: 汎用光源  
医療機器分類: 一般医療機器  
届出番号: 13B2X10104100315

#### 構成

- ライト
- バッテリーバック(ベルトホルダ付)
- ACアダプター
- バッテリーバック用ケース
- クリップオン
- 専用ケース
- 遮光ライトキャップ1個

バッテリーバックサイズ	W66.5×D13×H82mm
充電時間	約6時間(フル充電)
使用時間	約5時間
バッテリー寿命	約300回充電
色温度	約6,000K
照度	40,000LUX以上
重量	LEDライト・コード 36g バッテリーバック 112g



クリップオンを使用すると保護メガネ等に直接装着が可能です。※ホギーズ・アイガード装着時

## ガリレアンルーペマルチ TTLタイプ

### ガリレアンルーペマルチ TTLタイプ

価格 35,000円

- グレー 2.5倍/3.0倍
- Red 2.5倍/3.0倍



#### 構成

- フレーム本体
- プロテクトレンズ L, R, S, SS
- フレームバンド
- ラバーバンド
- レンズキャップ
- ルーペ袋
- 清掃布
- ルーペケース

一般名称: 双眼ルーペ  
医療機器分類: 一般医療機器  
届出番号: 13B2X10104100298

### ガリレアンルーペマルチ TTLタイプセットII

価格 49,800円

ガリレアンルーペマルチTTLタイプとデンタルLEDヘッドライトIIのセットです。

一般名称: 双眼ルーペ  
医療機器分類: 一般医療機器  
届出番号: 13B2X10104100317

### デンタルLEDヘッドライトII TTLタイプ

価格 23,800円

クリップタイプのTTL専用LEDライトです。

一般名称: 汎用光源  
医療機器分類: 一般医療機器  
届出番号: 13B2X10104100315

製品についての詳細は弊社ホームページをご覧ください。



<http://www.dentalsupply.co.jp/>

#### 別売品価格表

品名	価格	品名	価格
ガリレアンルーペマルチ用フレーム(シルバー/Red)	7,200円	ガリレアンルーペ用レンズキャップ 2.5倍	2,000円
ガリレアンルーペマルチ用ラバーバンド	800円	ガリレアンルーペ用レンズキャップ 3.0倍	2,000円
ガリレアンルーペマルチ用プロテクトアイグラス(2枚)	800円	ガリレアンルーペ用フレームバンド	800円
ガリレアンルーペマルチ用レンズ用フレーム	800円	ガリレアンルーペ用アップハンドル	800円
ガリレアンルーペマルチ用ジョイントフレーム(2個) シルバー/Red	800円	ガリレアンルーペ用遮光レンズキャップ 2.5倍	2,000円
ガリレアンルーペマルチ用コードクリップ(4個)	500円	ガリレアンルーペ用遮光レンズキャップ 3.0倍	2,000円
ガリレアンルーペマルチ用ノーズパッド	200円	デンタルLEDヘッドライトS/II コード付のみ	9,000円
ガリレアンルーペマルチ用ブラックスポンジ	200円	デンタルLEDヘッドライトII バッテリーバック	10,200円
		デンタルLEDヘッドライトII用ACアダプター	1,500円
		デンタルLEDヘッドライトII用遮光ライトキャップ	1,000円
		クリップオン	1,000円

※消耗品は保証の対象外となります。  
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。  
※本製品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

製造販売元

## 株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は



JAPAN DENTAL SUPPLY

# Galilean Loupes Multi & TTL(Through The Lens) Type

## ガリレアンルーペマルチ

## 進化を続けるガリレアンルーペ

歯科医師の細やかな根管治療、窩洞形成に  
歯科技工士の精密作業に  
歯科衛生士の確実なスクレーリング、PMTCCに  
あらゆるデンタルニーズをサポート



# Galilean Loupes Multi

進化したガリレアンルーペ、この多機能性を体感して下さい。

ガリレアンルーペマルチ

## LEDライト装着!

専用の『デンタルLEDヘッドライトII』を装着し、明るさをアップできます。40,000LUXのライトが口腔内を明るく照らし、作業効率を促進します。瞳孔間距離によってはライトをルーペの間に装着することもできます。

『デンタルLEDヘッドライトII』は、専用のクリップオンを使用することで保護メガネなどにも装着することができます。



ライトはルーペの間にも装着できます。

ホギーズ・アイガード装着時 ※メガネの形状によって装着できない場合がございます。

## 優れたコストパフォーマンス!

ルーペとLEDライトのセットが、なんと39,800円! リーズナブルな価格で、歯科医師の先生だけでなく歯科衛生士さんにもおすすめです。

## サポート力アップ

通常のストラップからラバーバンドに変更することで、サポート力がアップし、より安定感が得られるため長時間の作業でも疲れにくくなります。またラバーバンドを装着することで、メガネとルーペのフレームの重なりも気になりません。ノーズパッドはフレキシブルに形を変えられるので、お鼻にフィットさせられます。



用途に合わせて、2種類のコイルをご用意。

ノーズパッドを外して撮影

## 新素材採用で、耐久性に優れたフレーム

衝撃に強い新素材のナイロン樹脂を採用し、耐久性に優れております。軽量で弾力性があり、長時間作業の負担も軽減します。

## 矯正レンズの取り付け可能

別売のレンズ用フレームに合ったレンズをご用意いただければメガネ無しでルーペを使用することができます。

※矯正レンズの種類によっては、ご使用できない場合がございます。



【別売品】  
ガリレアンルーペマルチ用レンズ用フレーム  
価格800円

## 感染予防対策

診療姿勢が良くなり、作業部位に顔を近づけすぎることなく作業ができるため飛沫による感染の予防対策としてご使用いただけます。

## メガネの上から装着可能!

プロテクトアイグラスを外すことで、メガネをおかけの方でも装着が可能になります。また、メガネの形状に応じてノーズパッドを取り外して使用することもできます。



プロテクトアイグラスを外して撮影

ノーズパッドを外して撮影

# Galilean Loupes Multi TTL(Through The Lens) Type


ガリレアンルーペマルチ TTLタイプ

TTLはThrough The Lensの略で、プロテクトアイグラスに穴を開けてレンズが直接装着されているタイプです。



## 広い視野径が得られるTTLタイプ

TTLタイプは従来品と比べレンズと目の距離が近くなるので広い視野径が得られます。

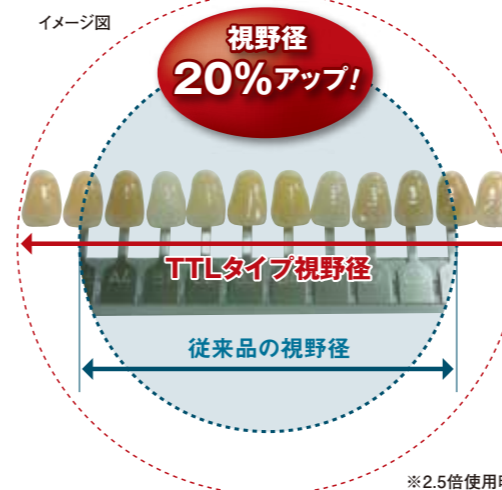

イメージ図

視野径  
20%アップ!

TTLタイプ視野径

従来品の視野径


※2.5倍使用時

## 選べる瞳孔間距離

L、R、S、SSの4サイズのプロテクトアイグラスがセットされておりますので、術者に適した瞳孔間距離をお選び頂けます。

### 瞳孔間距離

SSサイズ	56mm±1mm	Rサイズ	60mm±1mm
Sサイズ	58mm±1mm	Lサイズ	64mm±1mm

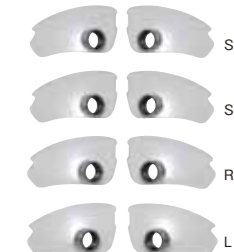

## 2.5倍と3.0倍の2つの倍率

倍率は2.5倍と3.0倍で、それぞれグレーとレッドの2色からお選びいただけます。

倍率	焦点距離 (mm)	焦点深度 (mm)	視野径 (mm)
2.5倍	420	90	100
3.0倍	420	60	70

※焦点距離は瞳孔間距離58mmの場合を示しています。

## サポート力アップ

ラバーバンドを装着することでサポート力がアップし、長時間の作業にも適しています。



## Overview

### 精密な治療が可能

- 2.5倍と3.0倍の倍率で、裸眼では見えづらい細部まで見えるようになります。
- 視野が拡大するので、診断力と治療行為における精度の向上が図れます。
- ルーペと瞳の距離をできるだけ近くすることで、より広い視野を確保することができます。



倍率 2.5

倍率 3.0

裸眼時

ガリレアンルーペ装着時


裸眼時

ガリレアンルーペ装着時

### 従来品ガリレアンルーペから受け継ぐ特長

### 眼精疲労を軽減

- 人間工学に基づく設計で、眼の疲労やストレスを緩和します。

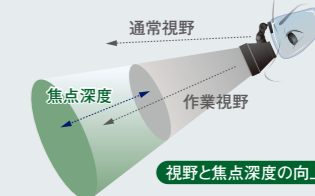

視野と焦点深度の向上

### 一定の作業距離により正しい姿勢を保つことが可能

- ガリレアンルーペを装着することで、安定した疲れにくい作業姿勢を保つことができます。
- 今まで悩んでいた首・肩・腰の痛みや疲労感から解放されます。



未装着時

肩・腰などに負担がかかる姿勢

装着時

疲れにくい安定した診療姿勢

### LEDヘッドライトで口腔内を明るく照射

- 口腔内を隅々まで明るく照らし、的確な処置をサポートします。
- ヘッドライトの電源はリチウムイオンを採用。
- 1回(約6時間)の充電で約5時間の使用が可能です。

